

Nekteck

Benutzerhandbuch

Nacken- und Schultermassagegerät mit Wärme

Model No.: LMS-801



Fragen oder Bedenken?

Kontaktieren Sie uns unter support@nekteck.com

FC **CE** **RoHS** **UK** **CA**  

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR ERWACHSENE

Wichtig: Jede Person, die schwanger sein könnte, einen Herzschrittmacher hat, an Phlebitis und/oder Thrombose leidet, ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Blutgerinnseln hat oder Pins/Schrauben/künstliche Gelenke oder andere medizinische Geräte im Körper implantiert hat, sollte vor der Verwendung eines für den Heimgebrauch konzipierten Massagegeräts einen Arzt konsultieren. Wenn die WÄRME zu stark für Ihren Komfort ist, schalten Sie bitte die Heizung aus.

VORSICHT

1. Nicht bei Säuglingen anwenden.
2. Nicht bei empfindlicher Haut anwenden.
3. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung. Im Inneren befinden sich keine Wartungspunkte.
4. Um das Risiko von Feuer oder elektrischem Schlag zu verringern, dieses Gerät nicht dem Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten gelesen, befolgt und befolgt werden, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.

Bei Verwendung eines elektrischen Geräts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

GEFAHR

Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern:

1. Ziehen Sie dieses Gerät nach dem Gebrauch sofort aus der Steckdose und vor der Reinigung.
2. Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie es sofort aus der Steckdose.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Badens oder Duschens.
4. Platzieren oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen kann.

5. Platzieren Sie es nicht in Wasser oder lassen Sie es in Wasser oder eine andere Flüssigkeit fallen.
6. Verwenden Sie niemals Pins oder andere metallische Befestigungen mit diesem Gerät.
7. Überprüfen Sie vor jeder Verwendung sorgfältig die Abdeckung. Entsorgen Sie das Gerät, wenn die Abdeckung Anzeichen von Verschleiß wie Risse oder Risse aufweist.
8. Halten Sie es trocken. Betreiben Sie es nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung.

WARNUNG

Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen zu reduzieren:

1. Lassen Sie ein Gerät niemals unbeaufsichtigt eingesteckt. Ziehen Sie es aus der Steckdose, wenn es nicht in Gebrauch ist, und bevor Sie Teile an- oder ablegen.
2. Eine enge Aufsicht ist erforderlich, wenn dieses Gerät von, auf oder in der Nähe von Kindern, Invaliden oder Personen mit Behinderungen verwendet wird.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den im Handbuch beschriebene Zweck. Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht empfohlenen Anhänge.
4. Betreiben Sie dieses Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt wurde oder in Wasser gefallen ist, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Senden Sie das Gerät zur Prüfung und Reparatur an ein Servicecenter.
5. Tragen Sie dieses Gerät nicht am Netzkabel oder verwenden Sie das Kabel als Griff.
6. Zerquetschen oder falten Sie dieses Gerät nicht bei der Lagerung.
7. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
8. Lassen Sie keine Gegenstände in Öffnungen fallen oder ein.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und den Innenbereich vorgesehen.
10. Zum Trennen setzen Sie alle Steuerelemente auf die Aus-Position und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
11. Überlasten Sie die Steckdose nicht. Verwenden Sie nur die angegebene Stromquelle.
12. Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht demontieren oder versuchen, es zu reparieren. Falsche Reparaturen können ein Risiko eines elektrischen Schlages oder einer Verletzung für Personen darstellen, wenn das Gerät verwendet wird.


13. Ziehen Sie niemals den Stecker aus der Steckdose, indem Sie am Netzkabel ziehen.
14. Verwenden Sie das Produkt nicht als Kopfmassagegerät.
15. Verwenden Sie das 3D-Massagegerät NICHT Länger als 20 Minuten.



**BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF
NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH**

KENNENLERNEN IHRES NACKEN- UND SCHULTERMASSEGERÄTS MIT WÄRME

1) LAGE VON TEILEN UND KONTROLLEN

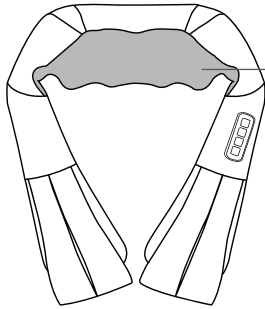

Hauptgerät

Shiatsu-Nodes




Bedienfeld

Ein/Aus

Massage-Richtung

Geschwindigkeitsregelung

Wärme Ein/Aus

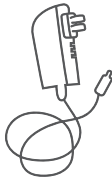

Adapter



Kfz-Netzstecker

2) SPEZIFIKATIONEN

Modell:	LMS-801
Stromversorgung:	110-240V / 60HZ
Leistungsaufnahme:	DC12V-2.5A / 30W
Produktgröße:	13.6x5.5x8.3 in / 34.5x14x21 cm
Gewicht:	2.73 lbs / 1.24KG
E-Mail:	support@nekteck.com
Website :	www.nekteck.com

I VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Produktprüfung: Überprüfen Sie den Massager vor dem ersten Gebrauch sorgfältig auf sichtbare Schäden oder Mängel. Verwenden Sie ihn nicht, wenn er beschädigt ist.

Stromanschluss: Stellen Sie sicher, dass der Massager an eine Stromquelle angeschlossen ist, die den spezifizierten Spannungsanforderungen des Produkts entspricht.

Platzierung: Positionieren Sie den Massager auf einem Stuhl oder Sofa, sorgen Sie für Stabilität und Komfort ohne Hindernisse.

Heizfunktion: Aktivieren Sie die Heizfunktion und heizen Sie 5 Minuten lang vor. Stellen Sie sicher, dass die Temperatur ein angenehmes Niveau erreicht.

Vertrautheit mit den Steuerelementen: Verstehen Sie die verschiedenen Massage-Modi, Heizeinstellungen und Intensitätsstufen, die auf dem Massager verfügbar sind.

Benutzerhandbuch: Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zur Referenz für Gebrauchsanweisungen, Wartungsrichtlinien und Sicherheitsvorkehrungen auf.

Sicherheitsanweisungen: Verwenden Sie den Massager nicht vor dem Schlafen, Autofahren oder auf Hautpartien mit Problemen oder Verletzungen.


Langsam beginnen: Beginnen Sie mit kurzen Massagesitzungen, damit sich der Körper allmählich anpassen kann. Erhöhen Sie bei Bedarf die Dauer und Intensität.

Bei Bedarf abbrechen: Falls während des Gebrauchs Unbehagen, Schmerzen oder ungewöhnliche Empfindungen auftreten, brechen Sie sofort ab und suchen Sie Rat bei einem Arzt.

BETRIEBSANWEISUNGEN

VERWENDUNG DES MASSAGERS


1. Für die innenverwendung den netzadapter an den massager anschließen. Stecken sie den adapter in eine steckdose. (setzen sie sich bequem auf den stuhl und verwenden sie den massager.)
 2. Für die autoverwendung den auto-netzstecker an den massager anschließen. Stecken sie den auto-netzstecker in den zigarettenanzünder im auto. (verwenden sie den massager nicht, während sie fahren.)
 3. Greifen sie die positionierungsriffe und legen sie die hauptgerät um ihren nacken, sodass die massageknoten in der mitte ihres rückens liegen.
 4. Drücken sie die ein/aus-taste, um die massage ein-/auszuschalten.
 5. Drücken sie die heiztaste, um die heizung ein-/auszuschalten.
 6. Drücken sie die richtungstaste, um die richtung der massageknoten zu ändern, im uhrzeigersinn oder gegen den uhrzeigersinn.
 7. Drücken sie die geschwindigkeitssteuerung, um die geschwindigkeit zu ändern.
- **HINWEIS:** Die Massagefunktion schaltet sich automatisch nach 15 Minuten aus.
Die Massage-Richtung ändert sich automatisch alle eine Minute.

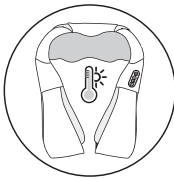


Shiatsu-Knetmassagegerät
mit Wärme




Sorgfältiges Massieren
mit 8 Knetrollen

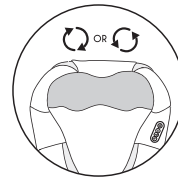

2 Massagerichtungen

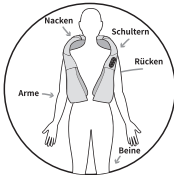

Anwendbar auf mehreren
Körperbereichen

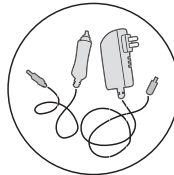

Tragbare Adapter
für einfaches Reisen



Automatische Abschaltung
nach 15 Minuten

I PFLEGE UND WARTUNG

- 1. Stellen Sie den Massager an einem sicheren, kühlen und trockenen Ort ab, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- 2. Nach dem Ausstecken mit einem weichen, feuchten Tuch und nicht abrasiven Reinigungsmitteln abwischen.
- 3. Tauchen Sie das Gerät niemals in Flüssigkeit.
- 4. Halten sie es von Lösungsmitteln und harten Reinigungsmitteln fern.
- 5. Versuchen sie nicht, diesen massager selbst zu reparieren. Es gibt keine vom benutzer austauschbaren teile.

I FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Massager funktioniert nicht	Stromstecker ist locker	Schließen Sie den Stecker wieder an die Steckdose an.
	Das Netzteil ist nicht korrekt eingesteckt	Ziehen Sie das Netzteil ab und stecken Sie es erneut ein.Unplug the adapter and plug it in again.
	Strom ist ausgeschaltet	Drücken Sie die Ein-Taste, um den Massager einzuschalten.
	Kein Strom	Versuchen Sie eine andere Steckdose oder überprüfen Sie den Zigarettenanzünder im Auto.
	Defektes Netzteil	Schließen Sie den Massager an den Auto-Stecker an, um die Funktionalität des Massagegeräts zu überprüfen.
Massager schaltet sich von selbst aus	Stromstecker ist locker	Folgen Sie den obigen Anweisungen und überprüfen Sie die Verbindung, das Netzteil und die Steckdosen.
	Der 15-Minuten-Timer ist abgelaufen	Der Massager verfügt über einen Timer und schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus. Sie können die Ein-Taste drücken, um eine weitere 15-minütige Sitzung zu starten.

Wenn Sie das Problem nach Überprüfung immer noch nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst-Support: support@nekteck.com.

I GARANTIEINFORMATIONEN

Wir gewähren eine Garantie von 1 Jahr auf das Produkt, die ab dem Kaufdatum beginnt. Innerhalb der Garantiezeit werden wir alle Mängel am Gerät beseitigen, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind. Bitte kontaktieren Sie uns unter: support@nekteck.com, um einen Garantieanspruch geltend zu machen.

Diese Garantie deckt nicht ab: Schäden durch unsachgemäße Verwendung, normaler Verschleiß oder Verwendung sowie Mängel, die einen vernachlässigbaren Einfluss auf den Wert oder Betrieb des Geräts haben. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen von nicht autorisierten Personen durchgeführt werden und wenn keine originalen Produktteile verwendet werden.

I KUNDENSUPPORT

1. Bei Fragen oder Anliegen zum Produkt zögern Sie bitte nicht, uns direkt unter support@nekteck.com zu kontaktieren oder besuchen Sie unsere Website unter: www.nekteck.com.
2. Wir haben ein problemloses Garantie- und Kundendienstteam für zufriedenstellende Lösungen für alle Probleme, die Sie haben könnten.



Email: support@nekteck.com

We will reply to your message within 24 hours!