

DE Handgelenk-Blutdruckmessgerät
GB Wrist blood pressure monitor
NL Polsbloeddrukmeter
FR Tensiomètre de poignet
ES Tensiómètre de muñeca
IT Misuratore di pressione da polso

Abbildung / Figure / Illustrate / Illustration / Illustrazione 1:


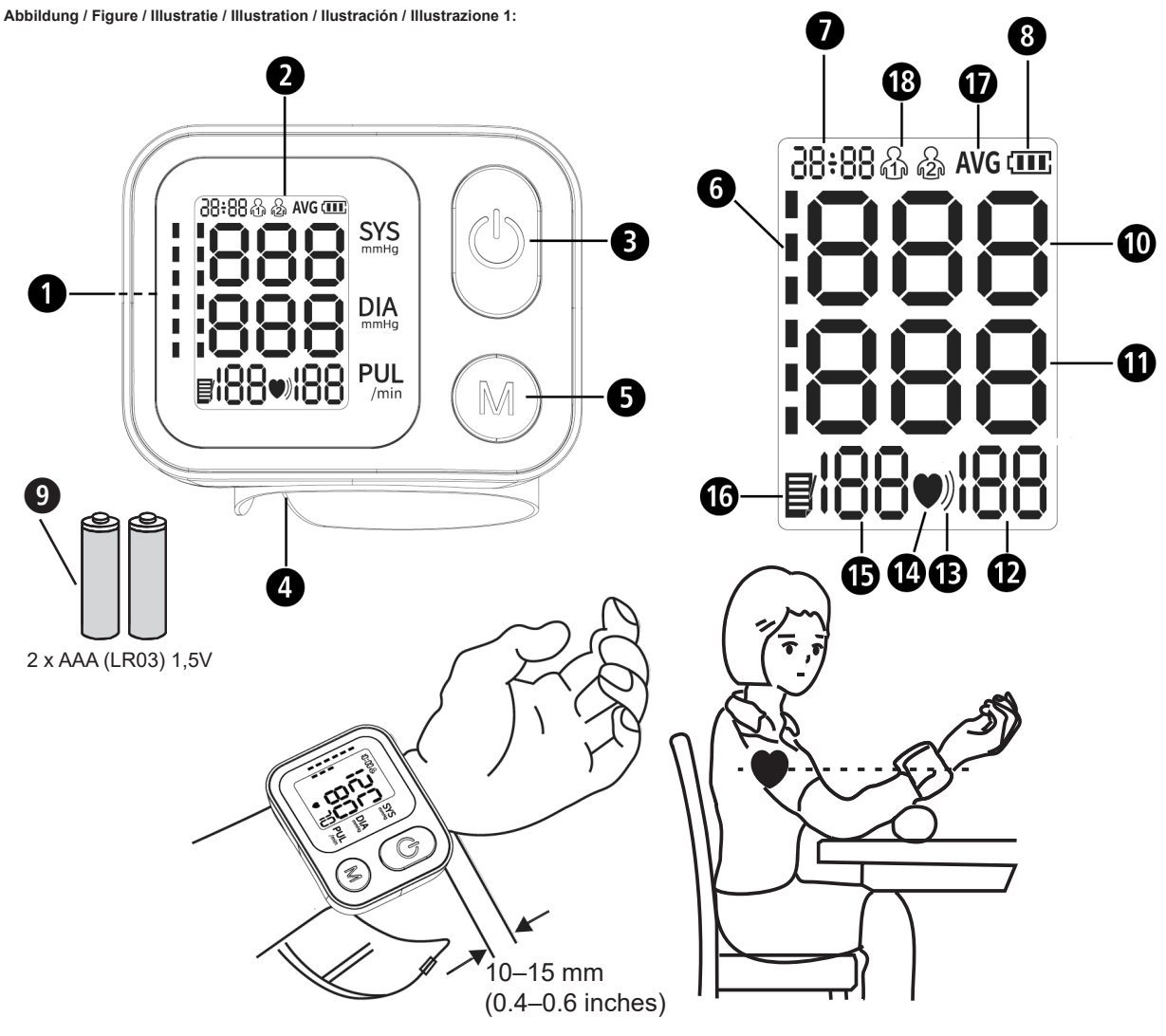


Abbildung / Figure / Illustrate / Illustration / Illustrazione 2:

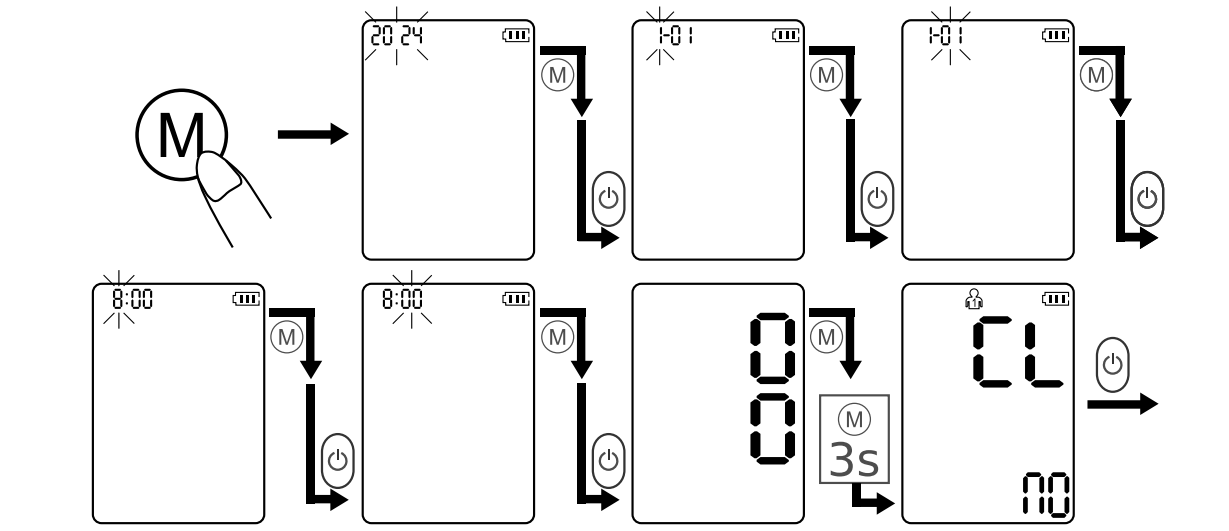

WICHTIG! Diese Hinweise sind wichtig für die Benutzung des Geräts. Sie enthalten wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

IMPORTANT! This instruction manual belongs to the device. The instruction manual includes important information on the initial start-up and handling. Read this instruction manual completely. Failure to follow these instructions may result in serious injury or damage to the device.

¡IMPORTANTE! Este manual de instrucciones forma parte del aparato. Contiene información importante sobre la puesta en servicio y la manipulación. Lea integralmente este manual de instrucciones. La no observancia de estas instrucciones puede provocar graves o daños en el aparato.

IMPORTANTE! Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante dell'apparecchio. Esse contengono informazioni importanti sull'installazione e sul gestione dell'apparecchio. Leggere tutte le istruzioni per l'uso. Il mancato rispetto delle stesse istruzioni può comportare gravi lesioni o danni all'apparecchio.

WARNING: Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.

WARNING: These warnings must be followed to prevent injury to the user.

¡ADVERTENCIA! Los avisos de advertencia deben seguirse para evitar eventuales lesiones a los usuarios.

AVVERTENZA: Gli avvisi di avvertenza devono essere rispettati per evitare possibili lesioni all'utente.

AVVERTENZA: È necessario rispettare le presenti avvertenze per evitare possibili lesioni all'utente.

CAUTION: These instructions must be followed to prevent possible injury to the device.

CAUTION: These instructions must be followed to prevent possible injury to the device.

ATTENTION: Ces avertissements doivent être respectés pour éviter d'éventuels dommages à l'appareil.

ATTENTION: Ces avertissements doivent être respectés pour éviter d'éventuels dommages à l'appareil.

ATTENZIONE: È necessario rispettare le presenti indicazioni per evitare di danneggiare l'apparecchio.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Handgelenk-Blutdruckmessgerät dient zur Messung des systolischen und diastolischen Drucks sowie des Pulsfrequenz einer erwachsenen Person mittels nicht-invasiver akustischer Technik. Es ist ein elektronisches Messinstrument, das die Blutdruckmessung über ein akustisches Signal ermöglicht. Es ist ein elektronisches Messinstrument, das die Blutdruckmessung über ein akustisches Signal ermöglicht. Es ist ein elektronisches Messinstrument, das die Blutdruckmessung über ein akustisches Signal ermöglicht.

Was ist Blutdruck?

Blutdruck ist der Druck, der durch den Herzschlag in den Gefäßen entsteht. Wenn sich das Herz zusammenzieht (Systole) und Blut in die Arterien pumpen, führt das zu einem Druckanstieg. Dieser höchste Wert wird als systolischer Blutdruck bezeichnet und ist der wichtigste Wert für die Beurteilung des Blutdrucks. Wenn das Blut fließt, sinkt der Druck ab. Der niedrigste Wert, den das Blut erreicht, wird als diastolischer Blutdruck bezeichnet. Der mittlere Wert zwischen systolischem und diastolischem Blutdruck wird als mittlerer Blutdruck bezeichnet.

Blutdruckklassifikation

systolisch mmHg	diastolisch mmHg	Klassifikation
< 120	< 80	Blutdruck
120 - 139	80 - 89	Blutdruck
140 - 159	90 - 99	Blutdruck
160 - 179	100 - 109	Blutdruck
180 - 199	110 - 119	Blutdruck
200 - 219	120 - 129	Blutdruck
220 - 239	130 - 139	Blutdruck
240 - 259	140 - 149	Blutdruck
260 - 279	150 - 159	Blutdruck
280 - 299	160 - 169	Blutdruck
300 - 319	170 - 179	Blutdruck
320 - 339	180 - 189	Blutdruck
340 - 359	190 - 199	Blutdruck
360 - 379	200 - 209	Blutdruck
380 - 399	210 - 219	Blutdruck
400 - 419	220 - 229	Blutdruck
420 - 439	230 - 239	Blutdruck
440 - 459	240 - 249	Blutdruck
460 - 479	250 - 259	Blutdruck
480 - 499	260 - 269	Blutdruck
500 - 519	270 - 279	Blutdruck
520 - 539	280 - 289	Blutdruck
540 - 559	290 - 299	Blutdruck
560 - 579	300 - 309	Blutdruck
580 - 599	310 - 319	Blutdruck
600 - 619	320 - 329	Blutdruck
620 - 639	330 - 339	Blutdruck
640 - 659	340 - 349	Blutdruck
660 - 679	350 - 359	Blutdruck
680 - 699	360 - 369	Blutdruck
700 - 719	370 - 379	Blutdruck
720 - 739	380 - 389	Blutdruck
740 - 759	390 - 399	Blutdruck
760 - 779	400 - 409	Blutdruck
780 - 799	410 - 419	Blutdruck
800 - 819	420 - 429	Blutdruck
820 - 839	430 - 439	Blutdruck
840 - 859	440 - 449	Blutdruck
860 - 879	450 - 459	Blutdruck
880 - 899	460 - 469	Blutdruck
900 - 919	470 - 479	Blutdruck
920 - 939	480 - 489	Blutdruck
940 - 959	490 - 499	Blutdruck
960 - 979	500 - 509	Blutdruck
980 - 999	510 - 519	Blutdruck
1000 - 1019	520 - 529	Blutdruck
1020 - 1039	530 - 539	Blutdruck
1040 - 1059	540 - 549	Blutdruck
1060 - 1079	550 - 559	Blutdruck
1080 - 1099	560 - 569	Blutdruck
1100 - 1119	570 - 579	Blutdruck
1120 - 1139	580 - 589	Blutdruck
1140 - 1159	590 - 599	Blutdruck
1160 - 1179	600 - 609	Blutdruck
1180 - 1199	610 - 619	Blutdruck
1200 - 1219	620 - 629	Blutdruck
1220 - 1239	630 - 639	Blutdruck
1240 - 1259	640 - 649	Blutdruck
1260 - 1279	650 - 659	Blutdruck
1280 - 1299	660 - 669	Blutdruck
1300 - 1319	670 - 679	Blutdruck
1320 - 1339	680 - 689	Blutdruck
1340 - 1359	690 - 699	Blutdruck
1360 - 1379	700 - 709	Blutdruck
1380 - 1399	710 - 719	Blutdruck
1400 - 1419	720 - 729	Blutdruck
1420 - 1439	730 - 739	Blutdruck
1440 - 1459	740 - 749	Blutdruck
1460 - 1479	750 - 759	Blutdruck
1480 - 1499	760 - 769	Blutdruck
1500 - 1519	770 - 779	Blutdruck
1520 - 1539	780 - 789	Blutdruck
1540 - 1559	790 - 799	Blutdruck
1560 - 1579	800 - 809	Blutdruck
1580 - 1599	810 - 819	Blutdruck
1600 - 1619	820 - 829	Blutdruck
1620 - 1639	830 - 839	Blutdruck
1640 - 1659	840 - 849	Blutdruck
1660 - 1679	850 - 859	Blutdruck
1680 - 1699	860 - 869	Blutdruck
1700 - 1719	870 - 879	Blutdruck
1720 - 1739	880 - 889	Blutdruck
1740 - 1759	890 - 899	Blutdruck
1760 - 1779	900 - 909	Blutdruck
1780 - 1799	910 - 919	Blutdruck
1800 - 1819	920 - 929	Blutdruck
1820 - 1839	930 - 939	Blutdruck
1840 - 1859	940 - 949	Blutdruck
1860 - 1879	950 - 959	Blutdruck
1880 - 1899	960 - 969	Blutdruck
1900 - 1919	970 - 979	Blutdruck
1920 - 1939	980 - 989	Blutdruck
1940 - 1959	990 - 999	Blutdruck
2000 - 2019	1000 - 1009	Blutdruck
2020 - 2039	1010 - 1019	Blutdruck
2040 - 2059	1020 - 1029	Blutdruck
2060 - 2079	1030 - 1039	Blutdruck
2080 - 2099	1040 - 1049	Blutdruck
2100 - 2119	1050 - 1059	Blutdruck
2120 - 2139	1060 - 1069	Blutdruck
2140 - 2159	1070 - 1079	Blutdruck
2160 - 2179	1080 - 1089	Blutdruck
2180 - 2199	1090 - 1099	Blutdruck
2200 - 2219	1100 - 1109	Blutdruck
2220 - 2239	1110 - 1119	Blutdruck
2240 - 2259	1120 - 1129	Blutdruck
2260 - 2279	1130 - 1139	Blutdruck
2280 - 2299	1140 - 1149	Blutdruck
2300 - 2319	1150 - 1159	Blutdruck
2320 - 2339	1160 - 1169	Blutdruck
2340 - 2359	1170 - 1179	Blutdruck
2360 - 2379	1180 - 1189	Blutdruck
2380 - 2399	1190 - 1199	Blutdruck
2400 - 2419	1200 - 1209	Blutdruck
2420 - 2439	1210 - 1219	Blutdruck
2440 - 2459	1220 - 1229	Blutdruck
2460 - 2479	1230 - 1239	Blutdruck
2480 - 2499	1240 - 1249	Blutdruck
2500 - 2519	1250 - 1259	Blutdruck
2520 - 2539	1260 - 1269	Blutdruck
2540 - 2559	1270 - 1279	Blutdruck
2560 - 2579	1280 - 1289	Blutdruck
2580 - 2599	1290 - 1299	Blutdruck
2600 - 2619	1300 - 1309	Blutdruck
2620 - 2639	1310 - 1319	Blutdruck
2640 - 2659	1320 - 1329	Blutdruck
2660 - 2679	1330 - 1339	Blutdruck
2680 - 2699	1340 - 1349	Blutdruck
2700 - 2719	1350 - 1359	Blutdruck
2720 - 2739	1360 - 1369	Blutdruck
2740 - 2759	1370 - 1379	Blutdruck
2760 - 2779	1380 - 1389	Blutdruck
2780 - 2799	1390 - 1399	Blutdruck
2800 - 2819	1400 - 1409	Blutdruck
2820 - 2839	1410 - 1419	Blutdruck
2840 - 2859	1420 - 1429	Blutdruck
2860 - 2879	1430 - 1439	Blutdruck
2880 - 2899	1440 - 1449	Blutdruck
2900 - 2919	1450 - 1459	Blutdruck
2920 - 2939	1460 - 1469	Blutdruck
2940 - 2959	1470 - 1479	Blutdruck
2960 - 2979	1480 - 1489	Blutdruck
2980 - 2999	1490 - 1499	Blutdruck
3000 - 3019	1500 - 1509	Blutdruck
3020 - 3039	1510 - 1519	Blutdruck
3040 - 3059	1520 - 1529	Blutdruck
3060 - 3079	1530 - 1539	Blutdruck
3080 - 3099	1540 - 1549	Blutdruck
3100 - 3119	1550 - 1559	Blutdruck
3120 - 3139	1560 - 1569	Blutdruck
3140 - 3159	1570 - 1579	Blutdruck
3160 - 3179	1580 - 1589	Blutdruck
3180 - 3199	1590 - 1599	Blutdruck
3200 - 3219	1600 - 1609	Blutdruck
3220 - 3239	1610 - 1619	Blutdruck
3240 - 3259	1620 - 1629	Blutdruck
3260 - 3279	1630 - 1639	Blutdruck
3280 - 3299	1640 - 1649	Blutdruck
3300 - 3319	1650 - 1659	Blutdruck
3320 - 3339	1660 - 1669	Blutdruck
3340 - 3359	1670 - 1679	Blutdruck
3360 - 3379	1680 - 1689	Blutdruck
3380 - 3399	1690 - 1699	Blutdruck
3400 - 3419	1700 - 1709	Blutdruck
3420 - 3439	1710 - 1719	Blutdruck
3440 - 3459	1720 - 1729	Blutdruck
3460 - 3479	1730 - 1739	Blutdruck
3480 - 3499	1740 - 1749	Blutdruck
3500 - 3519	1750 - 1759	Blutdruck
3520 - 3539	1760 - 1769	Blutdruck
3540 - 3559	1770 - 1779	Blutdruck
3560 - 3579	1780 - 1789	Blutdruck
3580 - 3599	1790 - 1799	Blutdruck
3600 - 3619	1800 - 1809	Blutdruck
3620 - 3639	1810 - 1819	Blutdruck
3640 - 3659	1820 - 1829	Blutdruck
3660 - 3679	1830 - 1839	Blutdruck
3680 - 3699	1840 - 1849	Blutdruck
3700 - 3719	1850 - 1859	Blutdruck
3720 - 3739	1860 - 1869	Blutdruck
3740 - 3759	1870 - 1879	Blutdruck
3760 - 3779	1880 - 1889	Blutdruck
3780 - 3799	1890 - 1899	Blutdruck
3800 - 3819	1900 - 1909	Blutdruck
3820 - 3839	1910 - 1919	Blutdruck
3840 - 3859	1920 - 1929	Blutdruck
3860 - 3879	1930 - 1939	Blutdruck
3880 - 3899	1940 - 1949	Blutdruck
3900 - 3919	1950 - 1959	Blutdruck
3920 - 3939	1960 - 1969	Blutdruck
3940 - 3959	1970 - 1979	Blutdruck
3960 - 3979	1980 - 1989	Blutdruck
3980 - 3999	1990 - 1999	Blutdruck
4000 - 4019	2000 - 2009	Blutdruck
4020 - 4039	2010 - 2019	Blutdruck
4040 - 4059	2020 - 2029	Blutdruck
4060 - 4079	2030 - 2039	Blutdruck
4080 - 4099	2040 - 2049	Blutdruck
4100 - 4119	2050 - 2059	Blutdruck
4120 - 4139	2060 - 2069	Blutdruck
4140 - 4159	2070 - 2079	Blutdruck
4160 - 4179	2080 - 2089	Blutdruck
4180 - 4199	2090 - 2099	Blutdruck
4200 - 4219	2100 - 2109	Blutdruck
4220 - 4239	2110 - 2119	Blutdruck
4240 - 4259	2120 - 2129	Blutdruck
4260 - 4279	2130 - 2139	Blutdruck
4280 - 4299	2140 - 2149	Blutdruck
4300 - 4319	2150 - 2159	Blutdruck
4320 - 4339	2160 - 2169	Blutdruck
4340 - 4359	2170 - 2179	Blutdruck
4360 - 4379	2180 - 2189	Blutdruck
4380 - 4399	2190 - 2199	Blutdruck
4400 - 4419	2200 - 2209	Blutdruck
4420 - 4439	2210 - 2219	Blutdruck
4440 - 4459	2220 - 2229	Blutdruck
4460 - 4479	2230 - 2239	Blutdruck
4480 - 4499	2240 - 2249	Blutdruck
4500 - 4519	2250 - 2259	Blutdruck
4520 - 4539	2260 - 2269	Blutdruck
4540 - 4559	2270 - 2279	Blutdruck
4560 - 4579	2280 - 2289	Blutdruck
4580 - 4599	2290 - 2299	Blutdruck
4600 - 4619	2300 - 2309	Blutdruck
4620 - 4639	2310 - 2319	Blutdruck
4640 - 4659	2320 - 2329	Blutdruck
4660 - 4679	2330 - 2339	Blutdruck
4680 - 4699	2340 - 2349	Blutdruck
4700 - 4719	2350 - 2359	Blutdruck
4720 - 4739	2360 - 2369	Blutdruck
4740 - 4759	2370 - 2379	Blutdruck
4760 - 4779	2380 - 2389	Blutdruck
4780 - 4799	2390 - 2399	Blutdruck
4800 - 4819	2400 - 2409	Blutdruck
4820 - 4839	2410 - 2419	Blutdruck
4840 - 4859	2420 - 2429	Blutdruck
4860 - 4879	2430 - 2439	Blutdruck
4880 - 4899	2440 - 2449	Blutdruck
4900 - 4919	2450 - 2459	Blutdruck
4920 - 4939	2460 - 2469	Blutdruck
4940 - 4959	2470 - 2479	Blutdruck
4960 - 4979	2480 - 2489	Blutdruck
4980 - 4999	2490 - 2499	Blutdruck
5000 - 5019	2500 - 2509	Blutdruck
5020 - 5039	2510 - 2519	Blutdruck
5040 - 5059	2520 - 2529	Blutdruck
5060 - 5079	2530 - 2539	Blutdruck
5080 - 5099	2540 - 2549	Blutdruck
5100 - 5119	2550 - 2559	Blutdruck
5120 - 5139	2560 - 2569	Blutdruck
5140 - 5159	2570 - 2579	Blutdruck
5160 - 5179	2580 - 2589	Blutdruck
5180 - 5199	2590 - 2599	Blutdruck
5200 - 5219	2600 - 2609	Blutdruck
5220 - 5239	2610 - 2619	Blutdruck
5240 - 5259	2620 - 2629	Blutdruck
5260 - 5279	2630 - 2639	Blutdruck
5280 - 5299	2640 - 2649	Blutdruck
5300 - 5319	2650 - 2659	Blutdruck
5320 - 5339	2660 - 2669	Blutdruck
5340 - 5359	2670 - 2679	Blutdruck
5360 - 5379	2680 - 2689	Blutdruck
5380 - 5399	2690 - 2699	Blutdruck
5400 - 5419	2700 - 2709	Blutdruck
5420 - 5439	2710 - 2719	Blutdruck
5440 - 5459	2720 - 2729	Blutdruck
5460 - 5479	2730 - 2739	Blutdruck
5480 - 5499		

