


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

MyClean® - B Bohrerbad

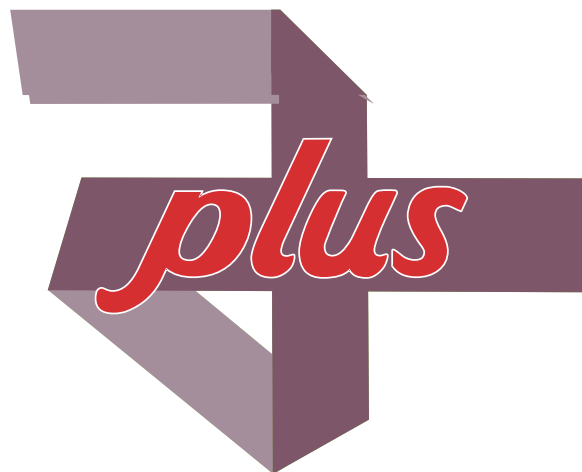

- Gebrauchsfertige Lösung von rotierendem Dentalinstrumentarium
- Wirkt Bakterizid, fungizid, mycobakterizid (inkl. M.-terrae)
- Wirkt virusinaktivierend (inkl. HBV/HIV) BVDV und Vaccinia (begrenzt viruzid gem. RKI)
- Speziell für rotierende Dentalinstrumente (Bohrer) entwickelt
- Mit wirksamem Korrosionsschutz
- Kein Gefahrstoff gemäß EG-Richtlinie
- Geeignet für Ultraschallbad
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Angenehmer Geruch, keine schädlichen Emissionen



Anwendung: Zur Desinfektion von rotierendem, medizinischem Instrumentarium im Einlegeverfahren oder Ultraschallbad.

Ausführungen: **MyClean-B Bohrerbad**

Artikelbeschreibung / Article Description	Duft / Aroma	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Bohrerbad	Neutral / neutral	5 Liter / 5 litres	79636	4046153116591	10306036	2

Einwirkzeiten :

Bakterizid, fungizid, mycobakterizid gemäß DGHM (M.-terrae und M.-avium), HBV/HIV wirksam	konz. 15 Min.
Bei sehr gut vorgereinigtem Instrumentarium	konz. 5 Min.


Hinweis: Standzeit bei gut vorgereinigtem Instrumentarium bis zu 7 Tagen.

Zusammensetzung: In 100g sind enthalten: Wirkstoffe: 1,125g Cocospropylenguanidiniumdiacetat. Weitere Bestandteile: synergetische Additive, Hilfsstoffe, Komplexbildner, Duftstoffe, Korrosionsschutzmittel

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIb

Verwendbarkeit:  3 Jahre

Symbole:

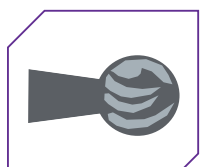

 MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean-B Bohrerbad 20140327